


natürlich  
schonend  
sicher

Zertifiziertes Medizinprodukt  
nach MDD 93/42/EWG

DKI GmbH

elektronischer gerätebau  
und produktinnovation

zertifiziert nach

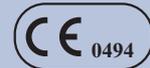

MADE IN GERMANY

# BMS-Theta

## Typ 1016


Medizinische Therapieeffekte  
durch Biomechanische Stimulation

### Einsatzbereiche

Orthopädie  
Sportmedizin  
Internistik  
Innere Medizin  
Pulmologie  
Neurologie  
Gynäkologie  
Osteopathie  
Augenheilkunde  
Physiotherapie  
TCM  
Ergotherapie  
Logopädie  
Geriatric  
Dermatologie  
Allgemeinmedizin

elektro- und  
physiotherapeutische  
Geräte aus Dresden

epi®

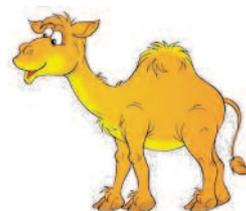

# BMS-Theta 1016




## Technische Daten

Stromversorgung	230 V, 50/60 Hz, 250 VA
Schutzklasse/Schutzgrad	I / IP 52
Risikoklasse	IIa
Schwingfrequenzen	15–40 Hz, optional auch 5–50 Hz
elliptische Schwingungen	vertikal 4 mm, horizontal 2 mm
Abmessungen	1250 x 570 x 650 (1090) mm
Gewicht	95 kg
Höhenverstellbereich	ab Standfläche 440–1020 mm
Neigungswinkel	85 °
Polster	Blau, Anthrazit, Limone weitere Farben nach Wunsch lieferbar



## Praxiserprobte Frequenzbereiche

10–20 Hz	Aufwärmen/Regeneration/Mikrozirkulation
15–18 Hz	Tonussenkung
18–22 Hz	entstauende Maßnahmen
18–26 Hz	Dehnung
20–25 Hz	Viszerale Therapie
22–24 Hz	Durchblutungsverbesserung, Aufwärmung
22–26 Hz	Muskelaufbau
24–26 Hz	Spasmenbehandlung
25 Hz	Tonussteigerung
ab 25 Hz	Gelenkmobilisation
27–30 Hz	Schmerztherapie

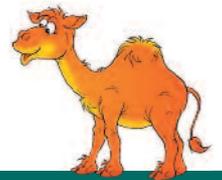

## Besondere Merkmale

- Maximaler Komfort und optimale Positionierung für Therapeut und Patient durch ergonomische Formen
- Gut erreichbare Bedienelemente
- Sehr leichtes Steuergerät
- Ungehindertes Arbeiten mit der gesamten Vibrathode, da keine störenden Rahmen vorhanden
- Vibrathodenhöhe und -neigung stufenlos elektromotorisch verstellbar
- Vibrathode eignet sich sowohl direkt für große Muskelpartien als auch indirekt für kleinere und tiefer liegende Muskelpartien

## Anwendungsgebiete

- Achillodynie, Hohlfuss, Plattfuß, Fußreflexzone
- Kompartementsyndrom, Schulter-Arm-Syndrom
- Kompressionssyndrom, Stauungssyndrom
- Durchblutungsstörungen, Stoffwechselstörungen, Stoffwechselschlacken
- Muskel: Reizung, Verspannung, Spasmen, Atrophie, MS
- Arthrosen, Ligamentose, Verletzungen, Entzündungen, Rhinitis
- Degenerative und rheumatische Erkrankungen, Osteoporose
- Orthopädische Erkrankungen (z.B. Schulter-, Rücken- und Hüftbeschwerden)
- Obstipation, Hämorrhoiden, Insuffizienzen
- Sehbeschwerden und -schwächen, Altersweitsichtigkeit, Kurzsichtigkeit (Kinder/Jugendliche), Maculadegeneration
- Hörschwächen, Tinnitus
- schlaffe Lähmungen, Paresen, Schlaganfall, Parkinson
- Bindegewebsschwäche, Cellulitis
- Muskelaufbau, Koordinationsverbesserung, Sturzprophylaxe
- Schmerztherapie, Spannungs-, Kopfschmerz, Migräne, Fibromyalgie, Trigeminus
- Bandscheibenschädigungen



Tel. +49 (0)351 80095-0  
www.dki-dresden.de/humanmedizin

Medizinprodukte  
Made in Germany

Stand 10/2012

Überreicht durch:

